

LANAFORM


Masážna podložka Bodyscan




SK SLOVENČINA

Masážna podložka

1

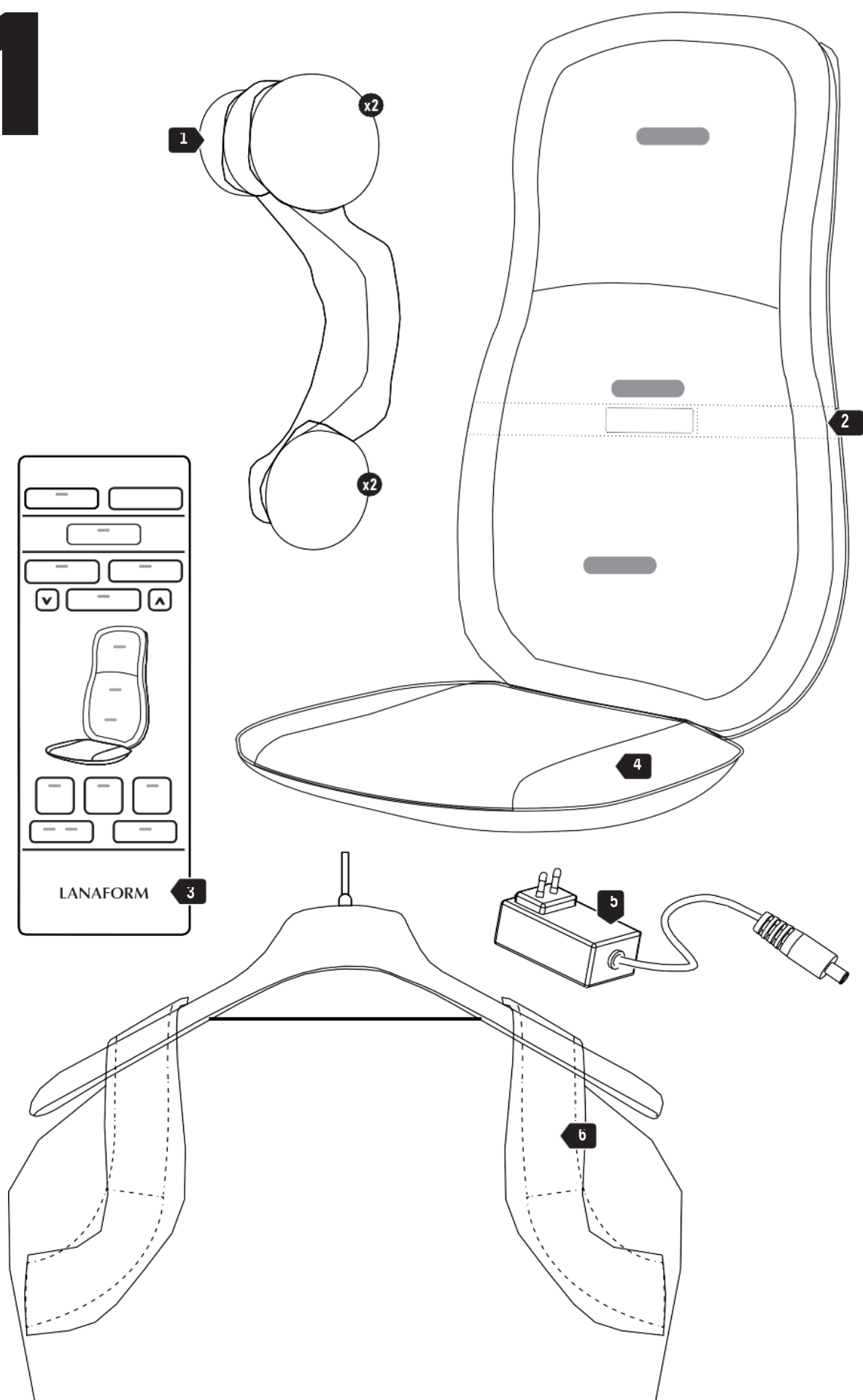

2

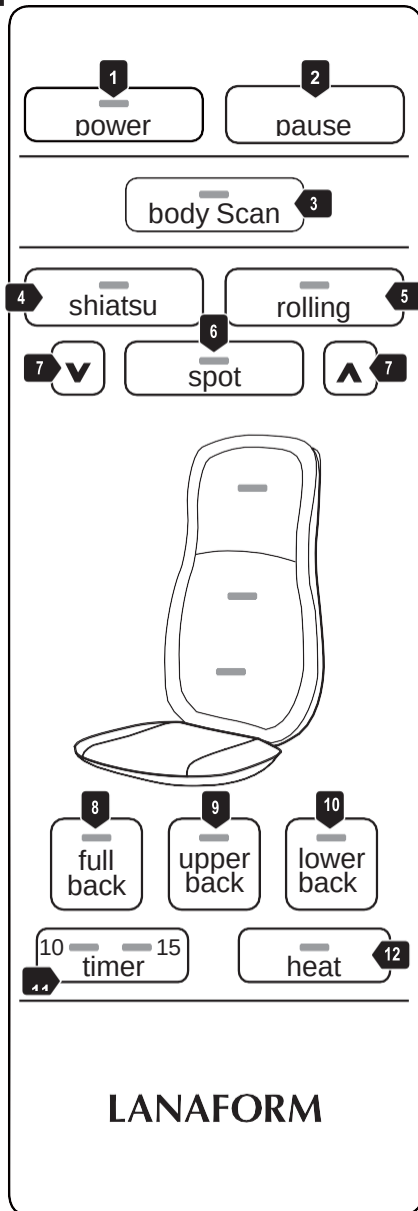

Obsah balenia

- 1 podložka Bodyscan Massager
- 1 diaľkové ovládanie
- 1 napájací kábel
- 1 návod na použitie

Opatrenia pre použitie

⚠ Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny, najmä tieto základné bezpečnostné pokyny.

📷 Fotografie a ďalšie zobrazenia produktu v tomto návode a na obale sú čo najpresnejšie, ale nemusia poskytovať dokonalú reprodukciu produktu.

⚠ Varovanie

Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili súvisiace riziká. Deťom nesmie byť dovolené hrať sa so zariadením. Čistenie a údržba nesmú byť vykonávané deťmi bez dozoru. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Povrch prístroja je horúci. Ľudia, ktorí sú citliví na teplo, by mali byť pri používaní tohto zariadenia opatrní. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané spoločnosťou Lanaform, alebo ktoré nie je dodané s týmto zariadením. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za podobný, ktorý je k dispozícii u dodávateľa alebo v jeho popredajnom oddelení. Nepoužívajte toto zariadenie, pokiaľ je poškodená zástrčka, pokiaľ zariadenie nepracuje správne, spadlo na podlahu, pokiaľ je poškodené alebo spadlo do vody. Nechajte zariadenie skontrolovať a opraviť u dodávateľa alebo jeho popredajnom oddelení. Nenoste toto zariadenie za napájací kábel a nepoužívajte kábel ako rukoväť. S týmto zariadením nikdy nepoužívajte špendlíky alebo iné kovové úchyty. Po použití alebo pred čistením zariadenie vždy odpojte. Pokiaľ zariadenie spadne do vody, ihneď ho odpojte, než ho vyberiete. Toto elektrické zariadenie nesmie byť nikdy ponechané zapnuté bez dozoru. Odpojte ho vždy, keď ho nepoužívate. Udržujte napájací kábel mimo horúcich povrchov. Nepoužívajte tento výrobok pred spaním. Masáž pôsobí ako stimulans, ktorý môže oddialiť nástup spánku. Nikdy nedovoľte, aby vám zariadenie spadlo a nikdy nekladajte predmety do žiadneho z otvorov. Nikdy nepoužívajte toto zariadenie v miestnosti, kde sa používajú aerosóly (spreje), alebo v miestnosti, kde sa podáva kyslík. Nepoužívajte toto zariadenie pod krytom alebo pod vankúšom. Nadmerné teplo môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osoby. Ak chcete zariadenie odpojiť, uistite sa, že je tlačidlo „POWER“ vypnuté, než vytiahnete zástrčku zo zásuvky. Ak máte obavy o svoje zdravie, pred použitím tohto zariadenia sa poraďte s lekárom. Nepoužívajte zariadenie:

- V prípade patologických zmien alebo lézií na chrbte (napr. vyklútnutie platničky, otvorená rana)
- Počas tehotenstva
- Počas spánku
- Vo vozidle
- Pre zvieratá
- Pri vykonávaní činností, počas ktorých by neočakávaná reakcia mohla byť nebezpečná
- Po vstrebaní látok, ktoré obmedzujú zmyslové vnímanie (napr. lieky s analgetickým účinkom, alkohol)

Ak pri používaní tohto zariadenia pocítite akúkoľvek bolesť, okamžite ho prestaňte používať a poraďte sa so svojím lekárom. Nepoužívajte toto zariadenie dlhšie ako 15 minút v kuse (nebezpečenstvo prehriatia). Pred opätovným použitím ho nechajte aspoň 15 minút vychladnúť. Nikdy nepoužívajte toto zariadenie na žiadnu časť tela, ktorá je opuchnutá alebo zapálená alebo ak máte vyrážku. Vyžiadať si lekársku radu pred použitím prístroja, ak:

- Trpíte závažným ochorením alebo ste podstúpili operáciu hornej časti tela

- Máte kardiostimulátor, implantát(y), alebo akúkoľvek inú zdravotnícku pomôcku, trombózu, cukrovku
- Ak cítite akúkoľvek bolesť s nejasnými príčinami.

Tento produkt je neprofesionálny masážny prístroj určený na uvoľnenie unavených svalov.

Nepoužívajte toto zariadenie ako náhradu lekárskeho ošetrovania. Je určený iba na domáce a neprofesionálne použitie. Nikdy nepoužívajte pod prikrývkou / prestieradlom, mohlo by dôjsť k upchatiu vzduchových otvorov. Zariadenie by sa nadmerne zahrialo, čo môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

⚠Varovanie

Predstavenie

Ďakujeme, že ste si vybrali Lanaform Bodyscan Massager. Bodyscan Massager je masážny poťah sedadla so 4 masážnymi hlavicami, ktoré dokonale napodobňujú masáž shiatsu a rolovaciu masáž. S funkciou skenovania môžete využiť jedinečnú masáž prispôbenú vášmu telu! Či už sa používa na celý chrbát a krk alebo len na konkrétny bod, masážny efekt je obzvlášť účinný na uvoľnenie stiahnutých svalov a tonizáciu unavených tkanív. Prístroj vám prináša blahodarnú relaxáciu, vďaka ktorej zabudnete na každodenný stres.

Popis zariadenia, obr. 1

- 1 Štyri masážne hlavice
- 2 Upevňovacie popruhy
- 3 Diaľkové ovládanie
- 4 Sedák
- 5 Napájací kábel
- 6 Popruh na zavesenie

Popis diaľkového ovládania, obr. 2

- 1 POWER: tlačidlo zapnutia/vypnutia a počiatočný reset masážneho mechanizmu
- 2 PAUSE: okamžite zastaví zariadenie
- 3 BODY SCAN: tlačidlo pre aktiváciu skenovania tela
- 4 SHIATSU: tlačidlo pre výber režimu masáže shiatsu
- 5 ROLLING: tlačidlo pre výber režimu rolovacej masáže
- 6 SPOT: tlačidlo pre výber masážnej oblasti (bodová masáž)
- 7 ŠÍPKY HORE a DOLE: tlačidlá pre nastavenie výšky (bodová masáž)
- 8 FULL BACK: masáž celého chrbta a šije
- 9 UPPER BACK: masáž hornej časti chrbta
- 10 LOWER BACK: masáž dolnej časti chrbta
- 11 TIMER: tlačidlo pre výber 10 alebo 15 minút
- 12 HEATÍ: tlačidlo pre zapnutie/vypnutie funkcie ohrevu

Príprava pred použitím

01 Položte Bodyscan Massager zvisle na vhodnú stoličku so sedákom a operadlom. Uistite sa, že je sedacia časť umiestnená tak, aby bola v plnom kontakte so sedákom stoličky av adekvátnej výške vášho chrbta.

02 Prístroj Bodyscan zaistíte pomocou popruhov.

03 Zapojte zariadenie do elektrickej siete.

Inštrukcie

01 Pritlačte chrbát zvisle na masážny prístroj. Budete musieť sedieť rovno, aby ste zaistili presnú palpáciu chrbta. Umožníte tým aktiváciu funkcie skenovania tela, ktorá meria veľkosť užívateľa. Na začiatku opatrne pritlačte chrbát k masážnej podložke. Uistite sa, že sedíte na sedadle pohodlne a s rovným chrbtom. Sedzte uprostred tak, aby sa masážne hlavice pohybovali správne vľavo a vpravo od vašej chrbtice.

Starostlivo skontrolujte, či je pre vás masážna poloha príjemná, a potom postupne presuňte váhu smerom k masážnemu zariadeniu. Masáž by mala byť vždy príjemná a uvoľňujúca. Pokiaľ je masáž bolestivá alebo nepríjemná, prerušte ju alebo zmeňte polohu prístroja.

02 Zapnite masážne zariadenie stlačením tlačidla POWER. Po celý čas palpácie chrbta bliká na diaľkovom zariadení tlačidlo BODYSCAN. Po ukončení palpácie sa aktivuje masážny program „Shiatsu“. LED diódy indikujú práve používanú masážnu funkciu.

03 Vyberte si svoj masážny režim:

- SHIATSU: Kombinácia shiatsu a rolovacej masáže aplikovanej na chrbát a šiju
- ROLLING: Rolovacia masáž aplikovaná na chrbát a šiju.

04 Vyberte si oblasť masáže:

- CELÁ ZADA: celý chrbát a krk
- HORNÝ CHYB: horná časť chrbta
- DOLNÝ CHYB: spodná časť chrbta
- SPOT: pomocou šípok „hore“ a „dole“ vyberte konkrétne miesto masáže chrbta.

05 Funkciu ohrevu zapnite alebo vypnite stlačením tlačidla HEAT.

06 Vyberte dobu (10 alebo 15 minút). Pri výbere masážnej oblasti sa aktivuje automatické vypnutie, ktoré sa nastaví na 15 minút. Stlačením tlačidla časovača je možné automatické vypnutie nastaviť na 10 alebo 15 minút.

Upozornenie: Ak zmeníte čas na časovači, začne odpočítavať znova od nuly. Aby ste zabránili prehriatiu prístroja, zvolte maximálnu dobu masáže na začiatku a počas masáže ju nemeňte.

07 Ak chcete masáž ukončiť pred koncom zvolenej doby, stlačte tlačidlo POWER. Masážna hlavica sa vráti do východiskovej polohy. Neodpájajte zariadenie od siete počas prevádzky. Po vypnutí zariadenia vždy počkajte niekoľko okamihov, než sa hlavica vráti do svojej východiskovej polohy.

Čistenie a údržba

01 Odpojte sedák od zdroja napájania a počkajte niekoľko minút, než ho začnete čistiť.

02 Vyčistite ho mäkkou, mierne navlhčenou špongiou.

03 Nikdy nedovoľte, aby voda alebo iná tekutina prišla do kontaktu s podložkou.

04 Pri čistení ho neponárajte do kvapaliny.

05 Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, kefy alebo riedidlá.

06 Pred opätovným použitím počkajte, až bude zariadenie úplne suché.

Skladovanie

Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, odporúčame ho uchovávať v pôvodnom obale na suchom mieste a nepokladať naň žiadne predmety. Zariadenie môžete tiež zavesiť do šatníkovej skrine pomocou vešiaku. K tomu treba zasunúť vešiak do závesného popruhu umiestnenom na boku zariadenia. Uistite sa, že používate stabilný drevený vešiak, ktorý unesie váhu zariadenia. Vyvarujte sa

kontakty s ostrými hranami a inými špicatými predmetmi, ktoré by mohli porezať alebo prepichnúť povrch látky. Nevešajte vankúš za kábel ručného ovládania alebo napájacieho kábla.

Odstraňovanie problémov

☹ Problém	? Príčina	☺ Riešenie
Masážne hlavice sa pohybujú príliš pomaly.	Masážne hlavice sú vystavené nadmernému namáhaniu.	Znížte tlak pri masáži.
Masážne hlavice sa pohybujú iba v hornej alebo dolnej oblasti.	Masáž bola aktivovaná iba pre určitú oblasť.	Stlačením tlačidla celá, horná časť chrbta alebo dolná časť chrbta zmeníte/rozšírite masážnu oblasť.
Masážne hlavice sa nepohybujú.	Zariadenie nie je zapojené.	Pripojte zariadenie a zapnite ho.
	Zariadenie nie je zapnuté	Zapnite masážny prístroj pomocou tlačidla POWER. Vyberte oblasť, ktorú chcete masírovať.
	Spustil sa systém ochrany proti prehriatiu, zariadenie je poškodené.	Kontaktujte predajcu alebo popredajné oddelenie.

Technické údaje

- Označenie produktu: LA110318
- Napájanie: 12VDC, 2,5A
- Rozmery: 108 x 40 x 10,9 cm
- Hmotnosť: cca. 9,0 kg

Poradenstvo pri likvidácii odpadu

Celý obal je vyrobený z ekologicky bezpečných materiálov, ktoré je možné odovzdať vo vašom miestnom triediacom stredisku a použiť ich ako druhotné suroviny. Kartón je možné umiestniť do koša na recykláciu papiera. Obalovú fóliu odneste do miestneho triediaceho a recyklačného strediska. Akonáhle prístroj prestanete používať, zlikvidujte ho ekologicky av súlade s právnymi predpismi.

Obmedzená záruka

Lanaform poskytuje na tento produkt záruku na akúkoľvek materiálnu alebo výrobnú vadu po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu, s výnimkou prípadov popísaných nižšie.

Záruka Lanaform sa nevzťahuje na spôsobené škody v dôsledku bežného opotrebovania. Zároveň záruka nepokryje poškodenie spôsobené hrubým, nevhodným alebo nesprávnym použitím, nehody, použitie neschváleného príslušenstva, zmeny vykonané na produkte alebo iné okolnosti akéhokoľvek druhu, ktoré sú mimo kontroly Lanaform. Spoločnosť Lanaform nemôže niesť zodpovednosť za žiadny typ značnej, nepriamej alebo špecifickej škody.

Všetky implicitné záruky týkajúce sa vhodnosti produktu sú obmedzené na dobu dvoch rokov od prvého dátumu nákupu, pokiaľ je možné dodať kópiu dokladu o kúpe.

Po obdržaní vášho zariadenia Lanaform opraví alebo vymení váš spotrebič podľa svojho uváženia a vráti vám ho. Záruka je platná iba prostredníctvom servisného centra Lanaform. Akýkoľvek pokus o údržbu tohto produktu osobou inou ako servisným strediskom spoločnosti Lanaform spôsobí neplatnosť tejto záruky.

Výrobca & Dovozca

Lanaform SA

Rue de la Légende, 55 4141 Louveigné, Belgie

www.lanaform.com

Distribútor v ČR:

CM Trade Via, s.r.o.

Olomoucká 3419/7

618 00 Brno Židenice

www.cm-trade.cz