

LANAFORM

Cell Roller




CS ČEŠTINA

MASÁŽ TECHNIKOU VÁKUOVÉHO VALCOVANIA

SK SLOVENČINA

MASÁŽ POMOCÍ TECHNIKY PODTLAKOVÉHO VÁLEČKOVÁNÍ

1

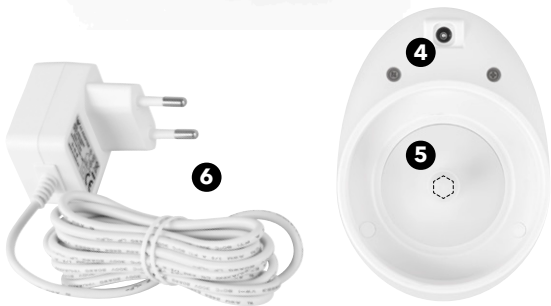

Představení

Děkujeme, že jste si vybrali masážní přístroj LANA-FORM Cell Roller.

Přístroj Cell Roller proti celulitidě vám umožní provádět masáže, která podporuje krevní oběh, zejména v oblastech postižených celulitidou, efektem pomerančové kůže a ochablou pojivovou tkání:

na stehnech, pažích, břiše a hýždích. Jeho výkonný motor zajišťuje silnou masáž pomocí stlačování a válcování.

Tento komplexní pohyb umožňuje masáž podkožní pojivové tkáně, čímž podporuje krevní a lymfatickou cirkulaci. Vaše pokožka bude hladší, pevnější a celulitida bude méně viditelná.

CS

Obsah

- 01 Vybalení
- 02 Bezpečnostní opatření
- 03 Popis produktu
- 04 Návod k obsluze
- 05 Čištění a údržba
- 06 Skladování
- 07 Pokyny k likvidaci odpadu
- 08 Omezená záruka

Vybalení

Před použitím opatrně otevřete obal. Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny příslušenství a zda nedošlo k poškození některých součástí během přepravy. Dále se řiďte pokyny pro instalaci a obsluhu uvedenými v tomto návodu. V případě jakéhokoli

poškození nebo poruchy kontaktujte prodejce nebo přímo společnost Lanaform. Při uplatňování reklamace budete potřebovat model přístroje, sériové číslo, datum nákupu, své údaje a adresu.

- 1 x zařízení Cell Roller
- 1 x zdroj napájení
- 1 x tato uživatelská příručka

Bezpečnostní opatření

⚠ Před použitím produktu si prosím přečtěte všechny pokyny, zejména těchto několik základních bezpečnostních pokynů.

📷 Fotografie a další vyobrazení produktu v této příručce a na obalu mají být co nejpresnější, ale nemusí zaručit dokonalou shodu s produktem.

Zařízení je určeno výhradně k osobnímu použití, nikoli k lékařským ani komerčním účelům. **N**enahrazuje lékařské ošetření.

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo vědí, jak jej zcela bezpečně používat, a

rozumí rizikům.

Děti si se zařízením nesmí hrát.

Děti se zařízením nesmí manipulovat ani jej čistit bez dozoru.

Pokud je elektrický napájecí kabel přístroje poškozen, je nutné jej zlikvidovat.

Pokud kabel nelze odpojit, musí být zařízení zlikvidováno.

Za žádných okolností zařízení neotevírejte ani neopravujte; nebylo

by již možné zaručit jeho správnou funkčnost. Nedodržení těchto pokynů může vést ke ztrátě záruky.

⚠ Varování

Používání masážního přístroje je zakázáno

- A zvířatech,
- Epoužívejte zařízení, pokud máte na masírované části těla jakékoli patologické změny nebo poranění (např. výhřez ploténky, otevřená rána),
- Pro masáže v oblasti srdce, pokud máte kardiostimulátor. V případě jiných částí těla se nejprve poraďte s lékařem,
- A kůži a oteklé nebo popálené části těla se zánětem nebo poraněním,
- V případě otevřených ran, na kapilárách, křečových žilách, v případě akné

- nebo růžovky,
- Při oparu nebo jiných kožních onemocněních
- Během těhotenství,
- A obličej (očí), hrtanu nebo jiných obzvláště citlivých částech těla,
- Epoužívejte přístroj k masáži nohou,
- Při spánku,
- Po požití drog nebo alkoholu (omezené smyslové

vnímání),

- Ve vozidle.

Před použitím tohoto masážního přístroje se poraďte s lékařem:

- Pokud trpíte vážným onemocněním nebo jste podstoupili operaci horní části těla,
- Pokud vám byl zaveden kardiostimulátor, implantáty nebo jakékoli jiné pomocné zařízení,

- Pokud jste někdy trpěli nebo v současné době trpíte zejména krevními sraženinami, cukrovkou nebo jinou bolestí neznámého původu.

Přístroj je určen pouze k použití v souladu s touto uživatelskou příručkou. **Výrobce** nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným nebo nesprávným

použitím.

⚠ Úraz elektrickým proudem

Stejně jako u jakéhokoli elektrického zařízení je nutné používat i toto masážní zařízení opatrně a s opatrností, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem. **Proto** používejte zařízení pouze:

s dodaným napájecím zdrojem a s napětím uvedeným na napájecím zdroji,

za žádných okolností, pokud je zařízení nebo jeho příslušenství viditelně poškozeno,

během bouřky.

Pokud je zařízení vadné nebo nefunguje správně, okamžitě jej zastavte a odpojte ze zásuvky. **Netahejte** za napájecí kabel zařízení ani neodpojujte napájení.

Nedržte a nikdy nenoste zařízení za napájecí kabel.

Udržujte kabely mimo horké povrchy. **Nepíchejte,**

neohýbejte ani nekruťte kabel. **Nezapichujte** do něj jehly ani jiné ostré předměty.

Ujistěte se, že masážní zařízení, vypínač, napájecí zdroj a kabel nepřijdou do kontaktu s vodou, párou nebo jinými kapalinami.

Proto používejte zařízení pouze v suchých vnitřních prostorech (tj. nikdy v koupelně nebo sauně).

Nikdy se nepokoušejte zvedat zařízení, které spadlo do

vody. **O**kamžitě jej odpojte ze zásuvky. **N**epoužívejte zařízení ani jeho příslušenství, pokud je viditelné jakékoli poškození. **Z**abraňte třesení zařízením a jeho pádu.

⚠ Opravy

Opravy elektrických spotřebičů

by měli provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři. **N**eodborné opravy mohou pro uživatele představovat vážné riziko. **V** případě jakýchkoli oprav se obraťte na poprodejní servis nebo autorizovaného prodejce.

⚠ Nebezpečí požáru

- Nesprávné používání tohoto spotřebiče nebo nedodržení těchto pokynů může způsobit požár! Proto masážní přístroj nikdy nepoužívejte:
- Pod přikrývkou nebo polštářem,
- V blízkosti benzínu nebo jiných vysoce hořlavých látek.

⚠ Zacházení

Po každém použití a před čištěním zařízení vypněte a odpojte jej ze zásuvky.

Nevkládejte žádné předměty do otvorů ani do rotujících částí. **U**jistěte se, že se pohyblivé části mohou vždy nerušeně pohybovat.

Chraňte zařízení před vysokými teplotami.

Popis produktu 1

01 Rukojeť

02 Posuvný přepínač, 3 polohy

- 0 = zastaveno
- 1 = nízká rychlost
- 2 = vysoká rychlost

03 Masážní válečky

04 Napájecí konektor (DC)

05 Konektor masážního válečku

06 Napájení

Návod k obsluze

Úvod

Celulitida může způsobovat tvorbu tukových usazenin na povrchu pokožky, a to zejména v oblasti stehen, paží a hýždí. Při rozsáhlé celulitidě dochází ke zvětšení tukových buněk, které následně vyvíjejí tlak směrem nahoru, což vede ke vzniku běžných tukových výstupků na povrchu pokožky. K prevenci nebo zmírnění celulitidy medicína i kosmetický průmysl

nabízejí mnoho způsobů léčby, žádný z nich však zatím nepřinesl zcela uspokojivé výsledky.

Masáž podporující krevní oběh, v kombinaci s pravidelným fyzickým cvičením a vyváženou stravou, však může vést ke zlepšení vzhledu pokožky.

Přístroj Cell Roller umožňuje provádět masáž, která podporuje krevní oběh, zejména v oblastech postižených celulitidou, efektem

pomerančové kůže a ochablou pojivovou tkání: nohy, paže a hýždě. Výkonný motor zajišťuje silnou stlačovací a válcovací masáž. Tento komplexní pohyb umožňuje masáž podkožní pojivové tkáně, čímž podporuje krevní i lymfatickou cirkulaci..

Díky své funkci stlačování a válcování přístroj napodobuje účinky profesionální masáže. Ergonomický design zařízení zajišťuje pohodlné použití v domácím prostředí.

Nastavení

- Zkontrolujte, zda zařízení, síťová zástrčka a kabel nejsou nijak poškozeny.
- Zasuňte připojovací zástrčku do zásuvky na masážním přístroji.

- Umístěte napájecí kabel tak, aby o něj nikdo nezakopl.

Použití


Masážní přístroj nesmí být silně přitlačován na oblast, kterou chcete masírovat. Pokud je masáž bolestivá nebo nepříjemná, přestaňte nebo změňte polohu přístroje.

Nevkládejte ani nestrkejte žádnou část těla, zejména prsty, mezi rotující masážní válečky.

Masážní přístroj zapnete posuvným přepínačem. Masážní válečky se začnou otáčet. Můžete si zvolit mezi nízkou a vysokou rychlostí masáže. Doporučujeme začít s nižší rychlostí. Pro vypnutí přístroje nastavte posuvný přepínač do polohy 0.

Použití na břicho a pas

Posadte se nebo stůjte pohodlně s rovnými zády. Položte Cell Roller na břicho a jemně napněte břišní svaly. Provádějte pomalé pohyby po celém břiše a nechte přístroj pracovat na každé oblasti. Začněte uprostřed břicha a můžete také masírovat přímo směrem k oběma stranám. Pro masáž vrchní části boků dělejte pohyby vpřed a vzad na každé straně, jak je znázorněno na obrázku. Několikrát opakujte jeden z těchto pohybů. Po několika použitích můžete také zvolit vyšší intenzitu pro lepší výsledky za kratší dobu, v závislosti na vaší pokožce a pocitu při používání Cell Rolleru.

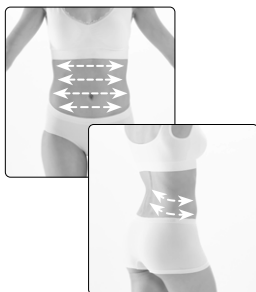


⚠ Varování

Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí, okamžitě přestaňte Cell Roller používat a poraďte se s lékařem.


Použití na nohou

Pro účinnou masáž nohou se mírně předkloněte a položte Cell Roller těsně nad kolena. Provádějte pomalé pohyby na přední i zadní straně stehen, dokud nedosáhnete oblasti třísel a boků. Střídejte masáž jedné a druhé nohy. Masáž by neměla trvat déle než 5 minut na každou nohu.

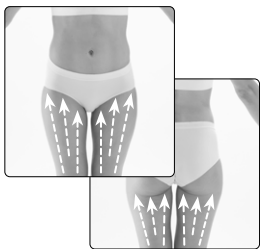


Použití na bocích stehen

Pro masáž na bocích stehen provádějte malé horizontální a vertikální pohyby. Nepřekračujte 5 minut na jednu oblast.

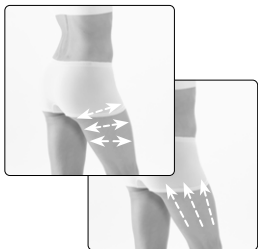

Použití na hýždě.

Pro zpevnění hýždí začněte používat Cell Roller u spodní části hýždí a postupujte směrem k pasu. Nechte přístroj procházet celou oblastí, kterou chcete ošetřit. Můžete také provádět horizontální pohyby směrem ven od středu. Doporučená doba používání je 5 minut na každé hýždě.

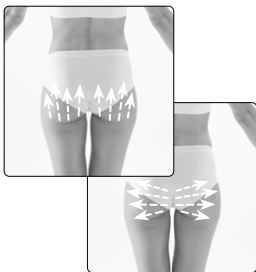

Použití na pažích

Pro posílení paží provádějte pohyby nahoru a dolů na přední a zadní straně paží



Čištění a údržba

⚠ Varování

CS

- Před čištěním odpojte kabel od zdroje napájení a vytáhněte přístroj ze zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze způsobem uvedeným níže. Za žádných okolností nesmí do přístroje nebo jeho příslušenství proniknout tekutiny.
- Masážní válečky lze sejmout prudkým tahem. Válečky můžete čistit měkkým kartáčkem, pod tekoucí vodou a s malým množstvím čistícího prostředku.
- Přístroj lze čistit měkkým, vlhkým hadříkem.
- Před opětovným použitím počkejte, až bude přístroj zcela suchý.

Skladování

- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, doporučujeme jej skladovat v originálním obalu na suchém místě. Na něj nic nepokládejte.



Pokyny k — likvidaci odpadu

Celý obal je vyroben z ekologicky bezpečných materiálů, které lze odevzdat ve vašem místním třídícím středisku a použít je jako druhotné suroviny. Karton lze umístit do koše na recyklaci papíru. Obalovou fólii odneste do místního třídícího a recyklačního střediska.

Jakmile přístroj přestane-
te používat, zlikvidujte jej
ekologicky a v souladu s
právními předpisy.

Omezená záruka

Lanaform poskytuje na tento produkt záruku na jakoukoli materiálovou nebo výrobní vadu po dobu dvou let od data nákupu, s výjimkou případů popsaných níže.

Záruka Lanaform se nevztahuje na způsobené škody v důsledku běžného opotřebení. Zároveň záruka nepokryje poškození způsobené hrubým, nevhodným nebo nesprávným použitím, nehody, použití neschváleného příslušenství, změny provedené na produktu nebo jiné okolnosti jakéhokoli druhu, které jsou mimo kontrolu Lanaform. Společnost Lanaform

nemůže nést odpovědnost za žádný typ značné, nepřímé nebo specifické škody.

Všechny implicitní záruky týkající se vhodnosti produktu jsou omezeny na dobu dvou let od prvního data nákupu, pokud lze dodat kopii dokladu o koupi.

Po obdržení vašeho zařízení Lanaform opraví nebo vymění váš spotřebič podle svého uvážení a vrátí vám jej. Záruka je platná pouze prostřednictvím servisního centra Lanaform. Jakýkoli pokus o údržbu tohoto produktu osobou jinou než servisním střediskem společnosti Lanaform způsobí neplatnost této záruky.

Prezentácia

Ďakujeme , že ste si vybrali masážne prístroj LANA-FORM Cell Roller.

Prístroj Cell Roller proti celulitíde vám umožní vykonávať masáž, ktorá podporuje krvný obeh, najmä v oblastiach postihnutých celulitídou, efektom pomarančové koža a ochabnutú spojivovú tkanív: na

stehnách, pažiach, bruchu a zadku. Jeho výkonný motor zaistuje silnú masáž pomocou stláčanie a valcovanie.

Tento komplexné pohyb umožňuje masáž podkožný spojivové tkaniva, čím podporuje krvnú a lymfatickú cirkuláciu. Vaša pokožka bude hladšia, pevnejšia a celulitída bude menej viditeľná.

SK

Obsah

- 07 Vybalenie
- 08 Bezpečnostné opatrenia
- 09 Popis produktu
- 10 Návod na obsluhu
- 11 Čistenie a údržba
- 12 Skladovanie
- 13 Pokyny na likvidáciu odpadu
- 14 Obmedzená záruka

Vybalenie

Pred použitím opatrne otvorte obal. Skontrolujte, či sú prítomné všetky príslušenstvo a či nedošlo k poškodeniu niektorých súčastou počas prepravy. Ďalej sa riadte pokyny pre inštaláciu a obsluhu uvedenými v tomto návodu. V prípade akéhokoľvek poškodenie alebo poruchy

kontaktujte predajca alebo priamo spoločnosť Lanaform. Pri uplatňovaní reklamácie budete potrebovať model prístroja, sériové číslo, dátum nákupu, svoje údaje a adresu.

- 1 x zariadenie Cell Roller
- 1 x zdroj napájania
- 1 x táto užívateľská príručka

Bezpečnostné opatrenia

⚠ Pred použitím produktu si prosím prečítajte všetky pokyny, najmä týchto niekoľko základných bezpečnostných pokynov.

📷 Fotografie a ďalšie vyobrazenie produktu v tejto príručke a na obalu majú byť čo najpresnejšie, ale nemusí zaručiť dokonalú zhodu s produktom.

Zariadenie je určené výhradne k osobnému použitiu, nie na lekárske ani komerčné účely. **N**enahrádza lekárske ošetrovanie.

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo vedia, ako ho úplne bezpečne

používať, a rozumie rizikám.

Deti si so zariadením nesmie hrať.

Deti so zariadením nesmie manipulovať ani ho čistiť bez dozoru.

Ak je elektrický napájací kábel prístroje poškodený, je nutné ho zlikvidovať. < li>

Ak kábel nemožno odpojiť, musí byť zariadenia zlikvidované.

Za žiadnych okolností zariadenia neotvárajte ani

neopravujte; ne-
bolo by už možné
zaručiť jeho správ-
nu funkčnosť. Ne-
dodržanie týchto
pokynov môže
viest' ku strate
záruky.

⚠ Varovanie

Používanie masáž-
neho prístroje je
zakázané:

- Na zvieratách,
- Nepoužívajte
zariadenia, ak
máte na ma-
sírované časti
tela akékoľvek
patologic-
ké zmeny ale-
bo poranenia
- (napr. výhrez
platničky,
otvorená rana),
- Pre masáže
v oblasti srd-
ce, ak máte
kardiostimu-
látor. V prí-
pade iných
častí tela sa
najprv porad'-
te s lekárom,
- Na kožu a
opuchnuté
alebo popále-
né časti tela so
zápalom ale-
bo poranením,
- V prípa-
de otvore-
ných rán, na

- kapilárach, krčových žilách, v prípade akné alebo rosacei,
- Pri oparu alebo iných kožných ochoreniach
 - Počas tehotenstva,
 - Na tvári (očiach), hrtane alebo iných obzvlášť citlivých častiach tela,
 - Nepoužívajte prístroj na masáž nôh,
 - Pri spánku,
 - Po požití drog alebo alkoholu (obmedzené zmyslové vnímanie),
 - Vo vozidle.
- P**red použitím tohto masážneho prístroje sa poraďte s lekárom:
- Ak trpíte vážnym ochorením alebo ste podstúpili operáciu hornej časti tela,
 - Ak vám bol zavedený kardiostimulátor, implantáty alebo akékoľvek

- iné pomocné zariadenia,
- Ak ste niekedy trpeli alebo v súčasnej dobe trpíte najmä krvnými zrazeninami, cukrovkou alebo inú bolesťou neznámeho pôvodu.

Prístroj je určený iba na použitie v súlade s touto užívateľskou príručkou.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným alebo nesprávnym

použitím.

⚠ Úraz elektrickým prúdom

Rovnako ako u akéhokoľvek elektrického zariadenia je nutné používať aj toto masážne zariadenia opatrne a s opatrnosťou, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom. **P**reto používajte zariadenia iba:

- S dodaným napájacím zdrojom a s napätím uvedeným

- na napájacím zdroji,
- Za žiadnych okolností, ak je zariadenie alebo jeho príslušenstvo viditeľne poškodené,
- Počas búrky.

Ak je zariadenie chybné alebo nefunguje správne, okamžite ho zastavte a odpojte zo zásuvky. **Neťahajte** za napájací kábel zariadenie ani neodpájajte napájanie. **Ne**držte a nikdy

nenoste zariadenie za napájací kábel. **Udržujte** káble mimo horúce povrchy. **Nepichajte**, neohýbajte ani nekrúťte kábel. **Nezapichujte** doň ihly ani iné ostré predmety.

Uistite sa, že masážne zariadenie, vypínač, napájací zdroj a kábel neprídu do kontaktu s vodou, parou alebo inými kvapalinami. **Preto** používajte zariadenia iba v suchých vnútorných

priestoroch (tj . nikdy v kúpeľni alebo saune).

Nikdy sa nepokúšajte zdvíhať zariadenie, ktoré spadlo do vody. **O**kamžite ho odpojte zo zásuvky. **N**epoužívajte zariadenie ani jeho príslušenstvo, pokiaľ je viditeľné akékoľvek poškodenie. **Z**abraňte trasenie

zariadením a jeho pádu.

⚠ Opravy

Opravy elektrických spotrebičov by mali vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári. opravy môžu pre užívateľov predstavovať vážne riziko. akýchkoľvek opráv sa obráťte na popredajný servis alebo autorizovaného predajcu.

⚠ Nebezpečenstvo požiaru

Nesprávne používanie tohto spotrebiče alebo

nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť požiar!

Preto masáž-
ne prístroj nikdy
nepoužívajte:

- Pod prikrýv-
kou alebo
vankúšom,

- V blízkosti
benzínu ale-
bo iných vy-
soko horľá-
vých látok.

⚠ Zaobchádzanie

Po každom použi-
tie a pred čistením
zariadenia vypni-
te a odpojte ho zo
zásuvky.

rotujúcich čas-
tí. **U**istite sa, že sa
pohyblivé časti
môžu vždy neru-
šene pohybovať.

Nevkladajte žiad-
ne predmety do
otvorov ani do

Chráňte zariade-
nia pred vysoký-
mi teplotami.

Popis produktu **1**

01 Rukoväť

02 Posuvný prepínač , 3 polohy

- 0 = zastavené
- 1 = nízka rýchlosť
- 2 = vysoká rýchlosť

- 03 Masážna valčeky
- 04 Napájací konektor (DC)
- 05 Konektor masážneho valčeka
- 06 Napájanie

Návod na obsluhu

Úvod

Celulitída môže spôsobiť tvorbu tukových usadenín na povrchu pokožky, a to najmä v oblasti stehien, paží a zadku. Pri rozsiahle celulitíde dochádza ku zväčšeniu tukových buniek, ktoré následne vyvíjajú tlak smerom hore, čo vedie ku vzniku bežných tukových výstupkov na povrchu pokožky. Na prevenciu alebo zmiernenie celulitídy medicína i kozmetický priemysel ponúkajú veľa spôsobov liečby, žiadny z nich však zatiaľ nepriniesol úplne uspokojivé výsledky.

Masáž podporujúce krvný obeh v kombinácii s

pravidelným fyzickým cvičením a vyváženú stravu však môže viesť ku zlepšeniu vzhľadu pokožky.

Prístroj Cell Roller umožňuje vykonávať masáž, ktorá podporuje krvný obeh, najmä v oblastiach postihnutých celulitídou, efektom pomarančové kože a ochabnutie spojivových tkanív: nohy, paže a zadok. Výkonný motor zaisťuje silnú stláčacie a valcovacie masáže. komplexné pohyby umožňuje masáž podkožný spojivové tkaniva, čím podporuje krvný i lymfatickú cirkuláciu.

Vďaka svojej funkcii stláčanie a valcovanie prístroj napodobňuje účinky

profesionálne masáže. Ergonomický dizajn zariadenia zaisťuje pohodlné použitie v domácom prostredí.

Nastavenia

- Odstráňte obal.
- Skontrolujte, či zariadenia, sieťové zástrčka a kábel nie sú nijak poškodené. < li>
- Zasuňte pripojovacia zástrčku do zásuvky na masážnym prístroji.
- Umiestnite napájací kábel tak, aby o neho nikto nezakopol.

Použitie

Masážny prístroj nesmie byť silne pritlačovaný na oblasť, ktorú chcete masírovať. Ak je masáž bolestivá alebo nepríjemná, prestaňte alebo zmeňte polohu prístroje.

Nevkladajte ani nestrkajte

žiadnu časť tela, najmä prsty, medzi rotujúce masážne valčeky.


Masážny prístroj zapnete posuvným prepínačom. Masážne valčeky sa začnú otáčať. Môžete si zvoliť medzi nízku a vysokú rýchlosťou masáže. Odporúčame začať s nižšou rýchlosťou. Na vypnutie prístroje nastavte posuvný prepínač do polohy 0.

Použitie na brucho a pás

Posadte sa alebo stojte pohodlne s rovnými chrbtom. Položte Cell Roller na brucho a jemne napnite brušný svaly. Vykonávajte pomalé pohyby po celom bruchu a nechajte prístroj pracovať na každej oblasti. Začnite uprostred brucha a môžete tiež masírovať priamo smerom k obojstranám. Pre masáž vrchný


časti bokov robte pohyby vpred a vzad na každé strane, ako je znázornené na obrázku .

Niekoľkokrát opakujte jeden z týchto pohybov. Po niekoľkých použitíach môžete tiež zvoliť vyššiu intenzitu pre lepšiu výsledky za kratšie dobu, v závislosti na vašej pokožke a pocitu pri používaní Cell Rolleru.

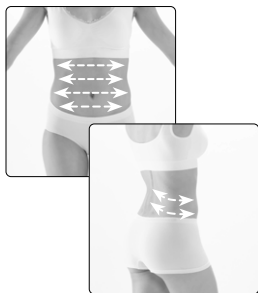

Použitie na nohy

Pre účinnú masáž nôh sa mierne predkloňte a položte Cell Roller tesne nad kolená. Vykonávajte pomalé pohyby na predné i zadné strane stehien, kým nedosiahnete oblasti slabín a bokov. Striedajte masáž jednej a druhej nohy. Masáž by nemala trvať dlhšie ako 5 minút na každú nohu.

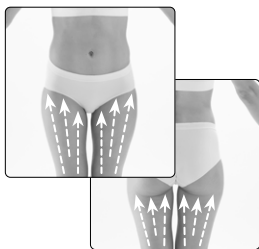


⚠ Varovanie

Ak pocítite akékoľvek nepohodlie, okamžite prestaňte Cell Roller používať a poraďte sa s lekárom.

Použitie na bokoch stehien


Pre masáž na bokoch stehien vykonávajte malé horizontálne a vertikálne pohyby . Neprekračujte 5 minút na jednu oblasť.

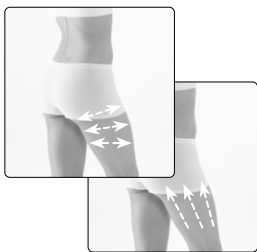

Použitie na zadok.

Na spevnenie zadku začnite používať Cell Roller pri spodnej časti zadku a postupujte smerom k pásu. Nechajte prístroj prechádzať celú oblasť, ktorú chcete ošetriť. Môžete tiež vykonávať horizontálne

pohyby smerom von od stredu. Odporúčaný čas používania je 5 minút na každé sedacie svaly.

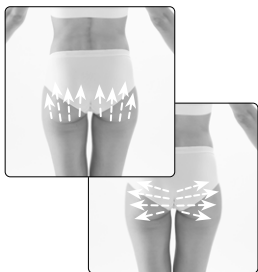

Použitie na pažiach

Na posilnenie paží vykonávajte pohyby hore a dole na predné a zadné strany paží.



Čistenie a údržba

⚠ Varovanie

- Pred čistením odpojte kábel od zdroja napájania a vytiahnite prístroj zo zásuvky.
- Prístroj čistite iba spôsobom uvedeným nižšie. Za žiadnych okolností nesmie do prístroja alebo jeho príslušenstvo preniknúť tekutiny.
- Masážna valčeky možno sňať prudkým ťahom. Môžete čistiť mäkkým kefkou, pod tečúcou vodou a s malým množstvom čistiaceho prostriedku.
- Prístroj možno čistiť mäkkým, vlhkým handričkou.
- Pred opätovným použitím počkajte, až bude prístroj úplne suchý.

Skladovanie

- Ak nebudete zariadenia dlhšia dobu používať, odporúčame ho skladovať v originálnom obalu na suchom mieste. Na neho nič nekladte.



Pokyny na likvidáciu odpadu

Obal je úplne vyrobený z materiálov, ktoré sú bezpečné pre životné prostredie a môžu sa odovzdať do triedeného zberu vo vašej obci, kde budú využité ako druhotné suroviny. Kartón je možné vhodiť do

kontajnera na papier. Obalové fólie je potrebné odovzdať v zbernom a recyklačnom centre vašej obce.

Keď už zariadenie nepoužívate, zlikvidujte ho spôsobom šetrným k životnému prostrediu a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Obmedzená záruka

Spoločnosť LANAFORM zaručuje, že tento výrobok je bez akýchkoľvek väd materiálu a spracovania odo dňa jeho zakúpenia po dobu dvoch rokov, s výnimkou nižšie uvedených podmienok. Záruka LANAFORM sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené bežným opotrebením tohto výrobku. Okrem toho sa záruka na tento výrobok LANAFORM nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím, nesprávnou manipuláciou, nehodou, použitím neautorizovaného príslušenstva, úpravami výrobku alebo akýmkoľvek inými podmienkami,

ktoré sú mimo kontroly spoločnosti LANAFORM. Spoločnosť LANAFORM nenesie zodpovednosť za žiadne druhotné, následné ani mimoriadne škody. Všetky implicitné záruky týkajúce sa vhodnosti výrobku sú obmedzené na obdobie dvoch rokov odo dňa pôvodného nákupu, pokiaľ je možné predložiť kópiu dokladu o kúpe. Po obdržaní zariadenia spoločnosť LANAFORM buď zariadenie opraví, alebo vymení, podľa okolností, a zašle ho späť. Záruka sa uplatňuje výhradne prostredníctvom servisného centra LANAFORM. Akákoľvek údržba tohto výrobku vykonaná inou osobou ako servisným centrom LANAFORM ruší túto záruku.



LANAFORM

Cell Roller
LA110223 / LOT 001

Manufacturer & Importer

Lanaform SA

Postal Address

Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium

+32 4 360 92 91

info@lanaform.com

www.lanaform.com